

# Massagematte »Relax«

Art.-Nr. 54 86 559

## BEDIENUNGSANLEITUNG


### Fernbedienung

Mit der kabelgebundenen Fernbedienung wählen Sie Ihre Massage und den entsprechenden Wärmegrad per Knopfdruck aus.

1. An/Aus
2. Nacken-Massage
3. Rücken-Massage
4. Lenden-Massage
5. Hüft-Massage
6. Wärmefunktion
7. Geschwindigkeit
8. Programmauswahl

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Gerätes den Stecker von der Stromquelle entfernen.
- Berühren Sie niemals die Massagematte, wenn diese mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Entfernen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle.
- Vorsicht bei der Verwendung der Massagematte bei folgenden Personengruppen: Kinder, aufsichtsbedürftige Personen.
- Reparieren Sie dieses Gerät nie selbst.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Gebrauch und wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Die Fernbedienung sollte nicht zwischen oder unter Ihrem Körper und dem Sitzkissen liegen.

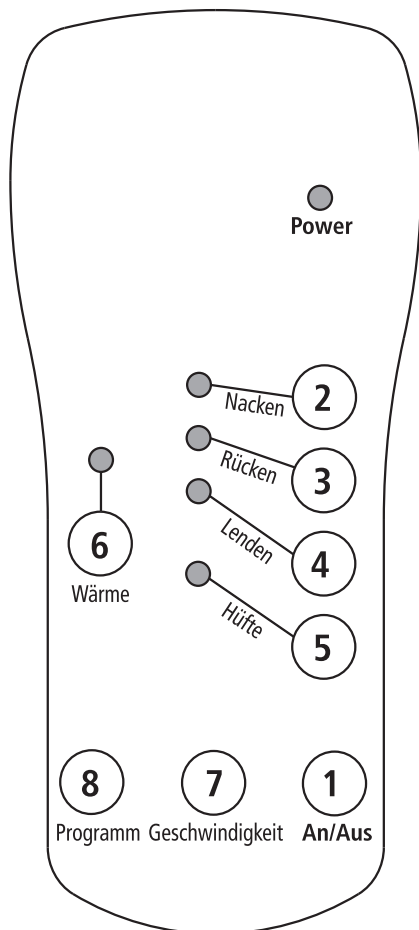

## Gesundheitshinweise

- Sollten Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben, befragen Sie vor dem Gebrauch der Massagematte bitte Ihren Arzt.
- Für Personen mit Herzschrittmachern ist die Massagematte NICHT geeignet.
- Sollten Sie Muskel- oder Gelenkschmerzen haben, befragen Sie bitte Ihren Arzt.
- Verwenden Sie die Massagematte nicht länger als 15 Minuten: Längerer Gebrauch könnte zur Überhitzung des Produktes führen. Sollte dies geschehen, unterbrechen Sie den Gebrauch und lassen Sie Matte und Netzteil zunächst abkühlen.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzteil.

## Wartung und Lagerung

Lagerung im Karton oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Platz.

Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen.

Wickeln Sie Stromkabel nicht um das Produkt und benutzen Sie das Stromkabel nicht als Aufhängeschnur.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zum Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Reinigung

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel von der Stromquelle entfernt ist und dass sich das Gerät in kaltem Zustand befindet.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Massagematte mit einem feuchten Schwamm oder einem Stofftuch.
- Verwenden Sie KEINE schleifenden Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Petroleum, Glasreiniger oder Möbelpolitur.
- Der Überzug ist abnehmbar und gemäß Waschinweis zu reinigen.

## Info zur Wärmefunktion

Nach Einschalten der Wärmefunktion steigt die Temperatur der Massagematte sehr langsam über 20 Minuten stetig an. Nach 20 Minuten schaltet sich die Wärmeeinheit automatisch ab.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild