


Fußmassagegerät mit Wadenmanschetten

Art.-Nr. 6023508

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

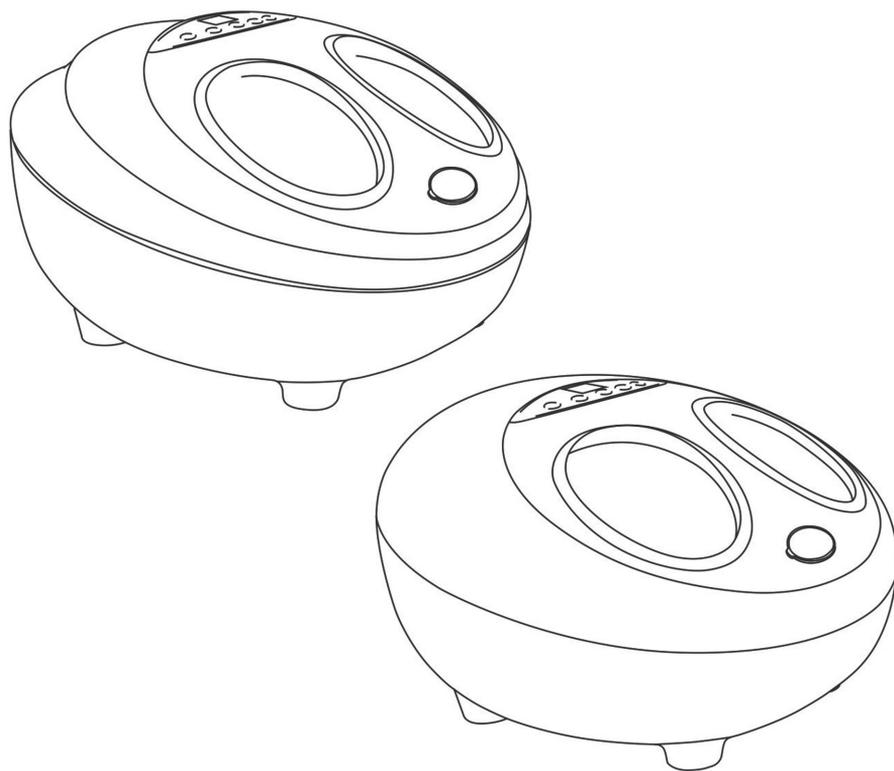

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Produkteigenschaften	4
Produktbeschreibung – A	4
Bedienelemente und Funktionsweise	5
Produktbeschreibung – B	6
Fehlersuche	7
Wartung und Pflege	7
Technische Daten	8

Sicherheitshinweise

a) Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Erstinbetriebnahme sorgfältig und vollständig durch, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Benutzung dieses Geräts sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Anweisungen in dieser Anleitung stets befolgt werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Benutzen Sie die Heizfunktion besonders vorsichtig, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an unempfindlichen oder überempfindlichen Hautstellen oder an Körperteilen mit schlechter Durchblutung.
- Kinder oder Personen, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, dürfen die Heizfunktion dieses Geräts nicht benutzen. Die nicht sachgemäße Benutzung dieses Geräts kann sehr gefährlich sein.
- Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen durch Überhitzung zu vermeiden, verdecken Sie dieses Gerät niemals mit Kissen, Decken oder dergleichen.
- Achten Sie darauf, das Gerät während des Betriebs niemals abzudecken, um Fehlfunktionen oder Beschädigung durch Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte beenden Sie die Anwendung mit diesem Gerät sofort, falls Sie sich unwohl fühlen.

- Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein sollten, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen. Schalten Sie das Gerät umgehend aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Geräteinnere und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Geräts fallen.
- Bitte stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »Aus«, bevor Sie das Gerät zum Ausschalten vom Netz trennen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Diagnose oder für medizinische Anwendungen geeignet.

b) Arbeitsumgebung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht bei Raumtemperaturen über 40°C.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung im Freien geeignet.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Elektroheizung, eines Herdes oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

c) Personen, denen empfohlen wird, dieses Gerät nicht zu benutzen

Bitte fragen Sie vor der Benutzung dieses Geräts zuerst Ihren Arzt um Rat, falls Sie eine der folgenden Symptome aufweisen:

- Bluthochdruck, Einnahme von Medikamenten oder wenn Sie unter anderen Beschwerden leiden.
- Wenn Sie an einer Herzkrankheit, zerebralen Arteriosklerose oder Zerebralthrombose leiden.
- Personen, die an einem bösartigen Tumor leiden.
- Schwangere Frauen und Frauen mit Menstruationsbeschwerden.
- Wenn Sie an Osteoporose leiden.
- Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Implantat tragen.
- Personen die an schweren Krankheiten leiden.
- Minderjährige.

d) Tasten

- Berühren Sie die Tasten nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Tasten von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.


Achtung!

- Achten Sie darauf, während der Benutzung dieses Geräts nicht einzuschlafen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder sich unwohl fühlen.
- Meiden Sie direkten Kontakt des Massagepads mit Händen, Fußgelenken, Knien, Brust und Bauch.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Stoffabdeckung beschädigt wurde.
- Es wird empfohlen, das Gerät eine Stunde vor bzw. nach den Mahlzeiten nicht zu benutzen, um nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.
- Schalten Sie die Heizfunktion nicht ein, wenn Sie das Gerät bei niedriger Raumtemperatur benutzen. Wir empfehlen Ihnen, die Raumtemperatur nach und nach auf ein normales Niveau zu erhöhen und erst dann die Heizfunktion einzuschalten.
- Wenn Sie das Gerät sofort benutzen, nachdem es von einem Raum mit niedriger Temperatur in warme Umgebung gebracht wurde, kann die Ansammlung von Wasserdampf im Inneren des Geräts die normale Funktionsweise beeinträchtigen oder sogar zu Fehlfunktionen führen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät eine Stunde lang in einen Raum mit normaler Zimmertemperatur zu stellen, bevor Sie es benutzen.

Produkteigenschaften

1. 4D Doppel-Luftkissenmassage: Hüllt den Bereich unterhalb des Knöchels vollständig ein und massiert alle Akupunkturpunkte Ihrer Füße.
2. Entspannung der Wadenmuskulatur durch komfortable wohltuende Luftdruckmassage.
3. Moxibustion-Massage löst kalte Feuchtigkeit auf und hält den Körper warm.
4. Rollende Knetmassage von den Zehen bis zu den Fußsohlen.
5. Simulierte Kratzmassage für die Fußgewölbe.
6. Besonders wohltuende Knetmassage für mehr Erholung.

Produktbeschreibung (A)

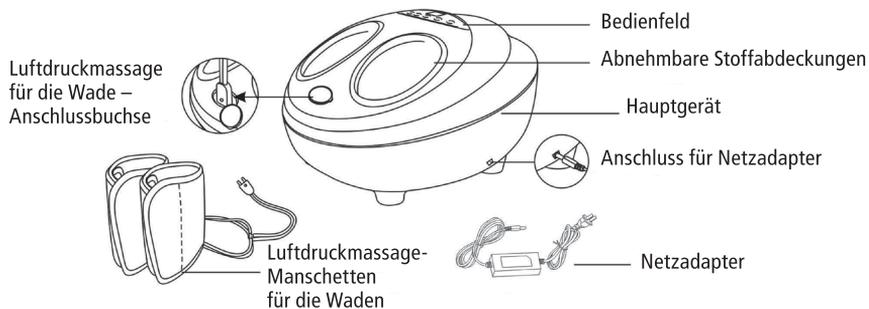

1. Das Bedienfeld: 5 voneinander unabhängige Tasten zum Betrieb und zur Funktionsauswahl des Geräts.
2. Massagepolster in der Mitte: Kratz-Akupressur am Fußgewölbe, mit Heizfunktion.
3. Massagepolster vorne: Roll-Knet-Akupressur der vorderen Fußsohle.
4. Massagepolster hinten: Druck-Knet-Akupressur der Ferse.
5. Luftkissen innen: Luftdruck-Massage am Spann (Fußrücken).
6. Abnehmbare Stoffabdeckungen: leicht zu waschen.
7. Luftdruckmassage für die Waden: Um sich eine wohltuende Wadenmassage zu gönnen, müssen Sie nur die Manschetten auf der Vorderseite öffnen und den Luftschlauch anschließen.

Bedienelemente und Funktionsweise



Modus: Sie können drei verschiedene Massage-Modi anwählen.

Modus 1: Die Modus-Taste leuchtet rot.

Modus 2: Die Modus-Taste leuchtet orange.

Modus 3: Die Modus-Taste leuchtet grün.



Intensität: Sie können die Intensität der Massage variieren. Die Intensität-Taste leuchtet in drei verschiedenen Farben. Niedrige Intensität: Die Taste leuchtet grün. Mittlere Intensität: Die Taste leuchtet orange. Hohe Intensität: Die Taste leuchtet rot.



An/Aus: Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät an und aus.




Heizfunktion: Während des Massagebetriebs können Sie mit dieser Taste die Heizfunktion zusätzlich aktivieren. Bei aktivierter Heizfunktion leuchtet die Taste blau.



Wadenmassage: Mit dieser Taste können Sie die Luftdruckmassage der Wadenmanschetten aktivieren. Achtung: Bitte schließen Sie zuerst den Luftschlauch an der Manschette an, bevor Sie diese Funktion aktivieren.

Produktbeschreibung (B)

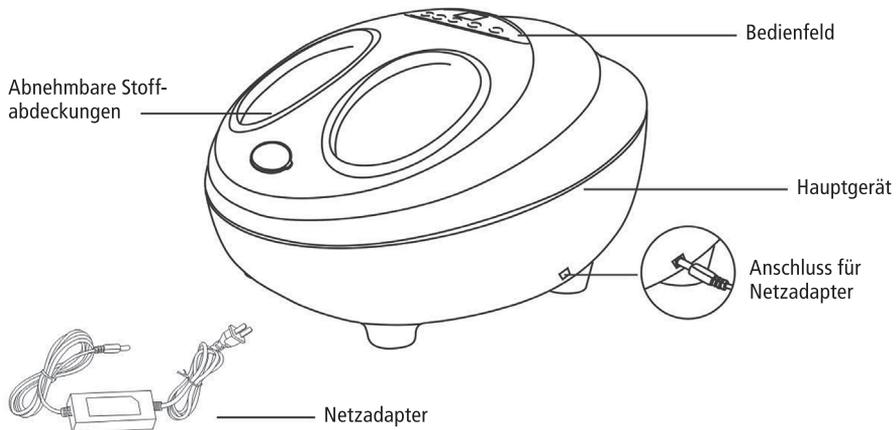

1. Das Bedienfeld: 5 voneinander unabhängige Tasten zum Betrieb und zur Funktionsauswahl des Geräts.
2. Massagepolster in der Mitte: Kratz-Akupressur am Fußgewölbe, mit Heizfunktion.
3. Massagepolster vorne: Roll-Knet-Akupressur der vorderen Fußsohle.
4. Massagepolster hinten: Druck-Knet-Akupressur der Ferse.
5. Luftkissen innen: Luftdruck-Massage am Spann (Fußrücken).
6. Abnehmbare Stoffabdeckungen: leicht zu waschen.

Bedienelemente und Funktionsweise



Timer: Mit dieser Taste stellen Sie den Timer für die Massage ein.



Modus: Sie können drei verschiedene Massage-Modi anwählen.

Modus 1: Die Modus-Taste leuchtet rot.

Modus 2: Die Modus-Taste leuchtet orange.

Modus 3: Die Modus-Taste leuchtet grün.



An/Aus: Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät an und aus.



Intensität: Sie können die Intensität der Massage variieren. Die Intensität-Taste leuchtet in drei verschiedenen Farben. Niedrige Intensität: Die Taste leuchtet grün. Mittlere Intensität: Die Taste leuchtet orange. Hohe Intensität: Die Taste leuchtet rot.



Heiz-Funktion: Während des Massagebetriebs können Sie mit dieser Taste die Heiz-Funktion zusätzlich aktivieren. Bei aktivierter Heizfunktion leuchtet die Taste blau.

Fehlersuche

Falls während des Betriebs Fehlfunktionen am Fußmassagegerät auftreten, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
keine Funktion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerät nicht am Netz angeschlossen. 2. An/Aus-Taste nicht gedrückt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen, ob Netzadapter am Gerät angesteckt und ob der Adapter an einer Steckdose angeschlossen ist. 2. An/Aus-Taste drücken.
Gerät schaltet sich plötzlich aus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerät wurde vom Netz getrennt. 2. Betriebszeit länger als 15 Min. 3. Gerät läuft zu lange und ist überhitzt. 4. Zu hoher Massagedruck, wodurch die Massagebälle nicht mehr rotieren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen, ob Netzadapter am Gerät angesteckt und ob der Adapter an einer Steckdose angeschlossen ist. 2. Gerät neu starten. 3. Gerät abkühlen lassen und dann neu starten. 4. Gerät neu starten.

Falls nach Beachtung sämtlicher oben aufgeführter Hinweise keine Lösung für das Problem oder die Fehlfunktion gefunden werden konnte, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Lagerung, Reinigung und Wartung

a) Lagerung

- Geben Sie das Gerät zur Lagerung in die farbige Box und stellen es an einen sicheren, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder verdreht werden.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel und hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.



- Vermeiden Sie es, das Gehäuse des Geräts mit scharfen Gegenständen zu verkratzen.
- Stellen Sie das Gerät niemals in direktes Sonnenlicht oder an einen Ort mit hoher Raumtemperatur.

b) Reinigung

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst mit der An/Aus-Taste aus und ziehen den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.

c) Wartung

- Halten Sie das Gerät sauber.
- Stellen Sie das Gerät niemals an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bitte verwenden Sie eine Staubabdeckung (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät abzudecken und somit vor Staub zu schützen, der in das Geräteinnere gelangen könnte, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	24 V –
Leistung:	48 W
Nennbetriebsdauer:	15 Minuten
Betriebsfrequenz:	50 Hz

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild